

PRECISION IN EVERY DETAIL

SIM-P

Labor-Reinstwassersystem

Gereinigtes Wasser-Futter, für die Reinstwasser-Produktion.



18.2 M Ω ·cm

UP Wasserwiderstand · 25°C

1.5–2.0

L/min

Standard / UV

Zwei Konfigurationsarten

Von Spezialinstrumenten bis hin zu kompletten Laborlösungen.

Produktbroschüre · V0.0.7

01

DESIGNED FOR DAILY WORK

Von getrennten Wasser- und Elektrosystemen bis hin zu wartungsfähigen Modulen.



Wasser/elektrische Trennung und bequeme Wartung

Elektrische Komponenten und Wasserkreisläufe nehmen separate Räume ein, um Fehler durch Feuchtigkeit oder Leckagen zu reduzieren. Magnetverschlüsse an der Vorder-, Rück- und Seitenseite ermöglichen den Zugriff für den Austausch von Verbrauchsmaterialien und die Fehlersuche.

01

Automatische Schutzabschaltung

Das System schaltet sich automatisch ab, wenn der Leitungswasserdruck zu niedrig ist, die Versorgung unterbrochen wird oder der Druckbehälter voll ist.



Ionenaustauscherharz und Reinigungskartuschen

Die Originalbroschüre der Serie nennt Ionenaustauscherharz von Rohm and Haas sowie jeweils ein Paar 15-Zoll-Reinigungskartuschen und 15-Zoll-Reinstwasserkartuschen für eine große Harzfüllung.

Struktur- und Verbrauchsmaterialabbildungen stammen aus der ursprünglichen SIM-Serie Broschüre. Die Standardausstattung wird durch die Spezifikationsseite und die gelieferten Konfigurationen definiert.

Diese Seite beschreibt die Strukturen und Verbrauchsmaterialien der SIM-Serie. RO-Membranen gelten für Konfigurationen mit Umkehrosmose. SIM-P verwendet gereinigte Wasserzufuhr; Bitte beziehen Sie sich auf die Spezifikationsseite für die tatsächliche Ausrüstung.

02

Online-Sichtbarkeit der Wasserqualität

Mikrocomputersteuerung und ein True-Color LCD zeigen Produkt-Wasserqualität und Systembetriebsdaten online an.



RO-Membran und Reinigung

Die Original-Serienliteratur spezifiziert Dow RO-Membranen mit Anti-Skalierung-Reinigung, automatischer Startspülung und manueller Reinigung.

02

STRUCTURE & MAINTENANCE

Separate Fächer für einen wartungsfreundlichen Schrank.



SIM-Serie Kabinett Illustration

Strukturelle Darstellung aus der Original-Serie Literatur. Magnetverschlüsse an der Vorder-, Rück- und Seitenseite erleichtern den Zugriff auf das Gehäuse, den Austausch von Verbrauchsmaterialien und die Fehlersuche.

Diese Abbildung zeigt die Serienschrankstruktur. Überprüfen Sie das Aussehen und die Konfiguration eines bestimmten Modells anhand des Produktbildes und der Spezifikationen.



Getrennte Wasser- und Elektrofachter

Wasserkreisläufe und elektrische Komponenten sind in getrennten Räumen ohne Querkontakt organisiert, wodurch elektrische Störungen und Sicherheitsrisiken durch Feuchtigkeit oder Leckagen reduziert werden.

Sicherheitsschutz

Die Maschine schaltet sich automatisch ab, wenn der Leitungswasserdruck zu niedrig ist, die Leitungswasserzufuhr unterbrochen wird oder der Druckbehälter voll ist.

03

APPLICATIONS & CONFIGURATION

Passen Sie Wasserqualität, Futter und Konfiguration an.

01

Integrierte Wasserqualitätsbeobachtung

Online UP Widerstandsmessung, mit einem True-Color LCD zur Anzeige der Wasserqualität und Systemdaten.

02

Standard- und niedrigorganische Sorten

Der UV-niedrige organische Typ fügt eine UV-Lampe mit zwei Wellenlängen hinzu; Die Quelle gibt TOC-Werte von 30 ppb bzw. 5 ppb an.

03

Wählen Sie für den Speisewassertyp

RO-Wasser, destilliertes Wasser oder entionisierte Wasserzufuhr; Temperatur- und Druckbedingungen gegen die Quelle überprüfen.

04

Wasser auf die Methode abstimmen

Überprüfen Sie Widerstand, TOC, Partikel und Mikroorganismen gegen die Wasseranforderungen der Analysemethode oder des angeschlossenen Instruments.

Wasserqualitätsaussagen in der Quelle

Der Hersteller gibt an, dass das Produktwasser die Anforderungen des Grades 1 in GB / T 6682-2008 und den relevanten ASTM-, CAP-, USP- und CLSI-Standards erfüllt oder übertrifft. Überprüfen Sie die Methodenkompatibilität Artikel für Artikel anhand der Wasserspezifikationen und -konfiguration.

Transkribiert aus der Quelle; Überprüfung des Standardstatus und der Methodenanforderungen bei der Projektauswahl.

04

FULL SPECIFICATIONS

Komplette Spezifikationen und Serienausstattung.

Parameter	Spezifikationen und Bedingungen
Produktmodell	SIM-P / SIM-PUV
Anforderungen an Speisewasser	RO Wasser, destilliertes Wasser oder entionisiertes Wasser; 5–45°C; 1 atm
UP-Wasserwiderstand	18.2 MΩ·cm (25°C)
Organischer Gesamtkohlenstoff (TOC)	Standardtyp: 30 ppb; UV-niedrige organische Art: 5 ppb
Schwermetallionen	<0.1 ppb
Absorption (254 nm, 1 cm Lichtweg)	≤0.001
Gelöstes Siliciumdioxid (als SiO ₂)	≤0.01 mg/L
Partikel (> 0,22 µm)	<1/ml; optionaler 0.22-µm-Entnahmefilter erforderlich
Mikroorganismus	<1 cfu/ml; optionaler 0.22-µm-Entnahmefilter erforderlich
Produktionsrate (25°C)	1.5–2.0 L/min
Wasserausgänge	1 Ausgang: UP Reinstwasser
Stromversorgung / Verbrauch	220±10% V; 50 Hz; 70 W
Betriebsumgebung	5–45°C; 20%–80% RH
Überwachung der Wasserqualität	Online UP Widerstandsmessgerät
Die Standardkonfiguration	Standardtyp: Hauptgerät mit Reinigungs- und Reinstwasserpatronen + Zubehör-Kit; PUV-Typ fügt eine UV-Lampe mit zwei Wellenlängen hinzu

Quelle Fußnoten: Leitungswasserqualität beeinflusst Wasserreinheit und Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien; Die angegebene Partikel-/Mikroorganismenleistung erfordert einen 0,22 µm Point-of-Use Filter. Die Produktionsleistung bezieht sich auf kommunales Leitungswasser bei Raumtemperatur 25 ° C und TDS <200 ppm.

05

QUALIFICATIONS & PATENTS

Hersteller-Referenzen und Patente.

Die ursprüngliche Broschüre besagt, dass Beijing Fly Science Technology Co., Ltd. seit seiner Gründung im Jahr 2014 Reinstwassersysteme erforscht, hergestellt und verkauft hat und technische Patente und Software-Urheberrechtszertifikate erhalten hat.



Zertifikat-Images werden aus der Quelle beibehalten. Beziehen Sie sich auf die Originale und Lieferelemente für Inhaber, Titel, Datum und Umfang.

06

PROJECT PLANNING

Bringen Sie Wasserqualität, Bedarf und Wartung in einer Auswahl-Checkliste zusammen.



Beijing Fly Science Technology Co., Ltd. · Fabrikfoto aus der Originalbroschüre

Auswahlelement	Zu überprüfende Informationen
Wassernutzung	Methodenspezifische Wasserqualität und UP-Dosieranforderungen
Nachfrage und Konfiguration	Täglicher Bedarf, Spitzenabgabe, SIM-P/SIM-PUV und Speichertank
Bedingungen der Website	TDS, Wassertemperatur, Druck, Stromversorgung, Installations- und Wartungsraum
Betrieb und Wartung	Verbrauchsmaterialien, Wechselintervalle, Wasserqualitätsüberwachung und Schutz-Abschalttests

Von Auswahlgesprächen bis zur routinemäßigen Wartung

Besprechen Sie Ziele für die Laborwasserqualität, Fütterungsbedingungen, Nachfrage und Verbrauchsmaterialien. Verwenden Sie die Literatur des Herstellers, um Vor-Ort-Checks, Betriebsanleitungen und Vorverkaufs- / After-Sales-Service-Arrangements vorzubereiten.


07

SERIES SELECTION

Wählen Sie die Serie für Ihren Speisewasser- und Produktwasserbedarf.

Modell und Serie	Kapazität / Durchfluss	Typ und Ausgang
SIM-T10 / T20 / T30	10 / 20 / 30 L/hr	Standard Typ; UP Reinstwasser und RO Umkehrosmose Wasser
SIM-T10UV / T20UV / T30UV	10 / 20 / 30 L/hr	Niedrig organische Art; UP Reinstwasser und RO Umkehrosmose Wasser
SIM-Q10 / Q20 / Q30	10 / 20 / 30 L/hr	Standard Typ; DI entionisiertes Wasser und RO Umkehrosmosewasser
SIM-RO10 / RO20 / RO30	10 / 20 / 30 L/hr	Standard Typ; RO Umkehrosmose Wasser
SIM-P	1.5~2.0 L/min	Standard Typ; Reinigungswasserzufuhr, Produktion von UP-Reinstwasser
SIM-PUV	1.5~2.0 L/min	Niedrig organische Art; Reinigungs-/Destillationswasserzufuhr, die UP-Reinstwasser produziert

SIM-Serie Flussdiagramm

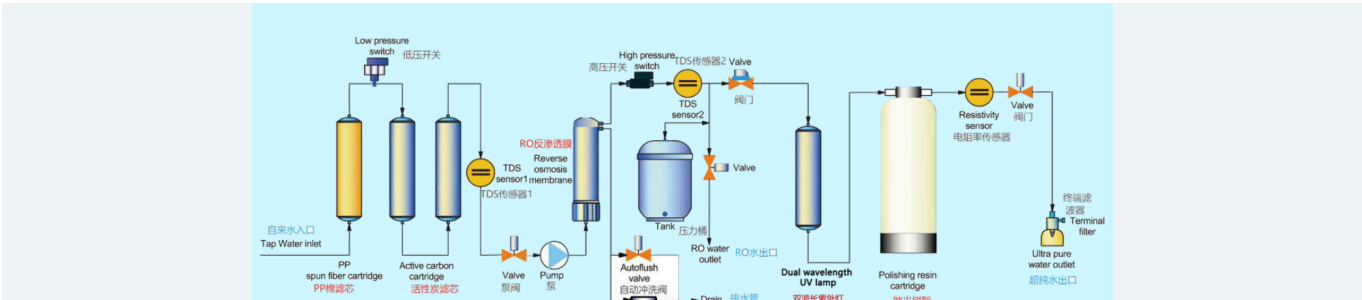

Das Quellflussdiagramm enthält Verzweigungen für verschiedene Serienkonfigurationen. Überprüfen Sie die tatsächlichen Leistungen und die Wasserqualitätsüberwachung jedes Modells anhand der Spezifikationsseite und der Standardausstattung.

07

SERIES SELECTION

Wählen Sie die Serie für Ihren Speisewasser- und Produktwasserbedarf.

Speisewasser, Umwelt und Wasserqualitätsinformationen

Die kommunale Speisewasserqualität beeinflusst die Qualität des gereinigten Wassers und die Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien. SIM-P verwendet gereinigte Wasserzufuhr; Wählen Sie andere Serien entsprechend der Leitungswasserbedingungen auf den jeweiligen Seiten aus.

Die Literatur des Herstellers besagt, dass das SIM-Q-Produktwasser die Anforderungen der Klasse 1 in GB / T 6682-2008 und den relevanten ASTM-, CAP-, USP- und CLSI-Standards erfüllt oder übertrifft. Diese Broschüre behält diese Quellenangabe bei; Überprüfung der Methodeneignung gegen Spezifikationen und Projektanforderungen.