

PRECISION IN EVERY DETAIL

SIM-P

Sistema de agua ultrapura de laboratorio

Alimentación de agua purificada, dedicada a la producción de agua ultrapura.

**18.2 MΩ·cm**

Resistividad del agua UP · 25°C

1.5–2.0

L/min

Estándar / UV

Dos tipos de configuración

Desde instrumentos especializados hasta soluciones completas de laboratorio.

Folleto del producto · V0.0.7

01

DESIGNED FOR DAILY WORK

Desde sistemas separados de agua y electricidad hasta módulos mantenibles.



Agua/separación eléctrica y mantenimiento conveniente

Los componentes eléctricos y los circuitos de agua ocupan espacios separados para reducir las fallas causadas por humedad o fugas. Los cierres magnéticos en la parte delantera, trasera y laterales proporcionan acceso para el reemplazo de consumibles y la solución de problemas.

01

Apagado protector automático

El sistema se apaga automáticamente cuando la presión del agua del grifo es demasiado baja, se interrumpe el suministro o el tanque de presión está lleno.



Resina de intercambio iónico y cartuchos de purificación

El folleto original de la serie especifica resina de intercambio iónico Rohm and Haas, con un par de cartuchos de purificación de 15 pulgadas y un par de cartuchos de agua ultrapura de 15 pulgadas para una carga abundante de resina.

02

Visibilidad en línea de la calidad del agua

El control de microordenador y un LCD de color verdadero muestran la calidad del agua del producto y los datos operativos del sistema en línea.



Membrana y limpieza del RO

La literatura original de la serie especifica membranas de RO Dow con limpieza anti-incrustación, descarga automática de inicio y limpieza manual.

Las ilustraciones estructurales y de consumibles provienen del folleto original de la serie SIM. El equipamiento estándar está definido por la página de especificaciones y la configuración suministrada.

Esta página describe las estructuras y consumibles de la serie SIM. Las membranas RO se aplican a configuraciones con ósmosis inversa. SIM-P utiliza alimentación de agua purificada; Consulte su página de especificaciones para el equipo real.

02

STRUCTURE & MAINTENANCE

Compartimentos separados para un gabinete mantenible.



Ilustración del gabinete de la serie SIM

Ilustración estructural de la literatura original de la serie. Los cierres magnéticos en la parte delantera, trasera y laterales facilitan el acceso al armario, el reemplazo de consumibles y la solución de problemas.

Esta imagen ilustra la estructura del gabinete de la serie. Compruebe la apariencia y configuración de un modelo específico en comparación con su imagen de producto y especificaciones.



Compartimentos de agua y eléctricos separados

Los circuitos de agua y los componentes eléctricos se organizan en espacios separados sin contacto cruzado, reduciendo las fallas eléctricas y los riesgos de seguridad causados por humedad o fugas.

Protección de seguridad

La máquina se apaga automáticamente cuando la presión del agua del grifo es demasiado baja, se interrumpe el suministro de agua o el tanque de presión está lleno.

03

APPLICATIONS & CONFIGURATION

Combine la calidad del agua, la alimentación y la configuración.

01

Observación integrada de la calidad del agua

Medición de resistividad UP en línea, con una pantalla LCD de color real que muestra la calidad del agua y los datos del sistema.

02

Tipos estándar y de bajo contenido orgánico

El tipo bajo-orgánico UV añade una lámpara UV de longitud de onda dual; La fuente especifica valores de TOC de 30 ppb y 5 ppb respectivamente.

03

Seleccione para el tipo de agua de alimentación

Agua RO, agua destilada o alimentación de agua desionizada; Compruebe las condiciones de temperatura y presión contra la fuente.

04

Combine el agua con el método

Compruebe la resistividad, TOC, partículas y microorganismos contra los requisitos de agua del método analítico o instrumento conectado.

Declaraciones de calidad del agua en la fuente

El fabricante declara que el agua del producto cumple o excede los requisitos de grado 1 en GB / T 6682-2008 y los estándares ASTM, CAP, USP y CLSI relevantes. Verifique la compatibilidad del método artículo por artículo contra las especificaciones y configuración del agua.

Transcrito de la fuente; Verificar el estado estándar y los requisitos del método durante la selección del proyecto.

04

FULL SPECIFICATIONS

Especificaciones completas y equipamiento de serie.

Parámetro	Especificaciones y condiciones
Modelo de producto	SIM-P / SIM-PUV
Requisitos de agua de alimentación	Agua RO, agua destilada o agua desionizada; 5-45°C; 1 atm
Resistividad del agua UP	18.2 MΩ·cm (25°C)
Carbono orgánico total (TOC)	Tipo estándar: 30 ppb; UV tipo bajo-orgánico: 5 ppb
Iones de metales pesados	<0.1 ppb
Absorción (254 nm, trayectoria óptica de 1 cm)	≤0.001
Sílice disuelta (como SiO ₂)	≤0.01 mg/L
Partículas (> 0,22 μm)	<1/ml; requiere un filtro opcional de 0.22 μm en el punto de uso
Microorganismos	<1 cfu/ml; requiere un filtro opcional de 0.22 μm en el punto de uso
Tasa de producción (25°C)	1.5–2.0 L/min
Salidas de agua	1 salida: UP agua ultrapura
Fuente de alimentación / consumo	220±10% V; 50 Hz; 70 W
Entorno de funcionamiento	5–45°C; 20%–80% RH
Vigilancia de la calidad del agua	Medidor de resistividad en línea UP
Configuración estándar	Tipo estándar: unidad principal con cartuchos de purificación y agua ultrapura + kit de accesorios; El tipo PUV añade una lámpara UV de doble longitud de onda

La calidad del agua del grifo afecta la pureza del agua y la vida útil de los consumibles; El rendimiento declarado de partículas/microorganismos requiere un filtro de punto de uso de 0,22 μm. El rendimiento de producción se refiere al agua del grifo municipal a temperatura ambiente 25 °C y TDS <200 ppm.

05

QUALIFICATIONS & PATENTS

Credenciales de fabricante y patentes.

El folleto original afirma que Beijing Fly Science Technology Co., Ltd. ha investigado, fabricado y vendido sistemas de agua ultrapura desde su establecimiento en 2014, obteniendo patentes técnicas y certificados de derechos de autor de software.



Las imágenes de certificado se conservan desde el origen. Consulte los originales y los documentos de suministro para el titular, título, fecha y alcance.

06

PROJECT PLANNING

Lleve la calidad del agua, la demanda y el mantenimiento en una lista de verificación de selección.



Beijing Fly Science Technology Co., Ltd. · Fotografía de fábrica del folleto original

Elemento de selección	Información a verificar
Uso del agua	Calidad del agua específica del método y requisitos de dispensación de UP
Demanda y configuración	Demanda diaria, dosificación de pico, SIM-P/SIM-PUV y tanque de almacenamiento
Condiciones del sitio	TDS, temperatura del agua, presión, fuente de alimentación, instalación y espacio de mantenimiento
Operación y mantenimiento	Consumibles, intervalos de sustitución, monitorización de la calidad del agua y pruebas de apagado protector

Desde las discusiones de selección hasta el mantenimiento rutinario

Discutir los objetivos de calidad del agua de laboratorio, condiciones de alimentación, demanda y consumibles. Utilice la documentación del fabricante para preparar las comprobaciones en el sitio, la orientación operativa y los arreglos de servicio de preventa/postventa.


07

SERIES SELECTION

Seleccione la serie para sus necesidades de agua de alimentación y agua de producto.

Modelo y serie	Capacidad / flujo	Tipo y salida
SIM-T10 / T20 / T30	10 / 20 / 30 L/hr	Tipo estándar; Agua ultrapura y agua de ósmosis inversa del RO
SIM-T10UV / T20UV / T30UV	10 / 20 / 30 L/hr	Tipo de bajo contenido orgánico; Agua ultrapura y agua de ósmosis inversa del RO
SIM-Q10 / Q20 / Q30	10 / 20 / 30 L/hr	Tipo estándar; Agua desionizada DI y agua de ósmosis inversa RO
SIM-RO10 / RO20 / RO30	10 / 20 / 30 L/hr	Tipo estándar; Agua de ósmosis inversa RO
SIM-P	1.5–2.0 L/min	Tipo estándar; Alimentación de agua purificada, produciendo agua ultrapura UP
SIM-PUV	1.5–2.0 L/min	Tipo de bajo contenido orgánico; Alimentación de agua purificada / destilada, produciendo agua ultrapura UP

Diagrama de flujo de la serie SIM

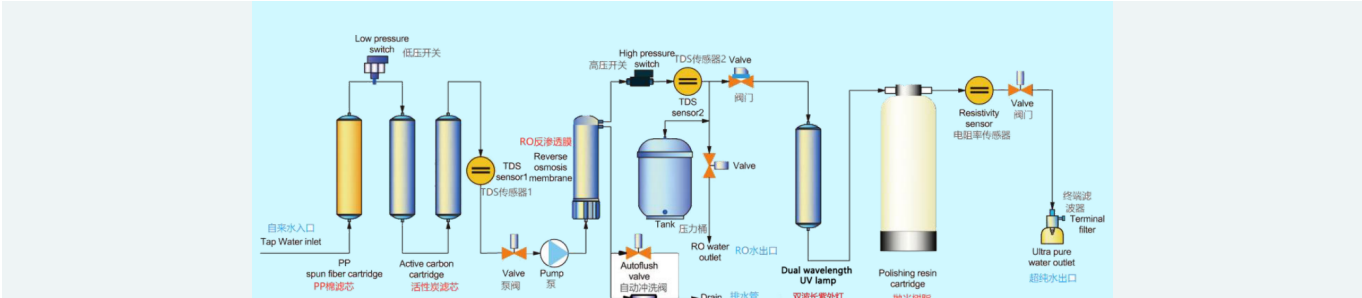

El diagrama de flujo de origen incluye ramas para diferentes configuraciones de serie. Compruebe las salidas reales de cada modelo y el monitoreo de la calidad del agua contra su página de especificaciones y equipamiento estándar.

07

SERIES SELECTION

Seleccione la serie para sus necesidades de agua de alimentación y agua de producto.

Agua de alimentación, medio ambiente e información sobre la calidad del agua

La calidad del agua de alimentación municipal afecta la calidad del agua purificada y la vida consumible. SIM-P utiliza alimentación de agua purificada; Seleccione otras series según las condiciones del agua del grifo en sus páginas respectivas.

La literatura del fabricante afirma que el agua del producto SIM-Q cumple o excede los requisitos de Grado 1 en GB/T 6682-2008 y los estándares relevantes ASTM, CAP, USP y CLSI. Este folleto mantiene esa declaración de fuente; Verificar la idoneidad del método frente a las especificaciones y los requisitos del proyecto.